

ポータブル**排尿検知器**

uchie®
思いやりをかたちに—
since1988

PAROOS

— パルース —

- ✓ 快適な介護
- ✓ 簡単に使用
- ✓ すぐに確認


ボタンを
押すだけ
カンタン操作



服の上からおむつが濡れているか

※尿とりパッドを使用したオムツにお使いください。

カンタン確認!

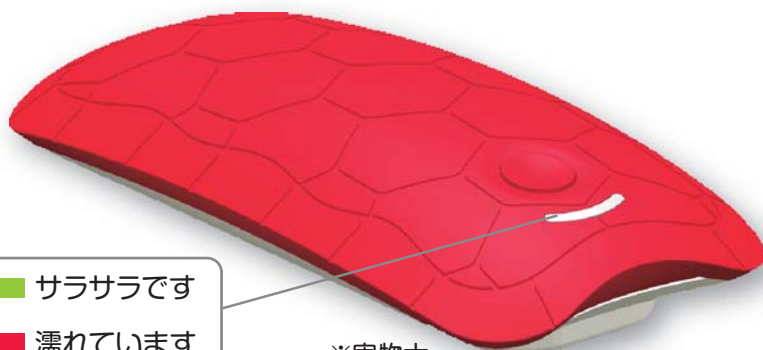

サラサラです
濡れています

※実物大

電池寿命

1日24回使用の場合
最大18ヶ月以上使用可能

※使用する単4電池の容量によって
差が生じることがあります。

7,800 (税抜) 円

単4電池2本(お試し用)

使用方法

排尿測定時、パルス製品の底面(センサー面:緑の楕円)を服の上から当て、ボタンを押して測定してください。

センサー面がすべて触れるように当て、赤色LEDが点滅したら、おむつを交換してください。



正確に測定するには『PAROOS』という文字が刻まれた楕円形の底面(センサー面)全体が服の上にすべて接するようにしてください。



正しい使用例



誤った使用例



測定する時は、センサー面が人体や他の物質(液体類など)に触れないようにしてください。

特長

- 服を脱がさずに着たままの状態でおむつが濡れているかどうかすぐに確認できます。※尿とりパッドを使用したオムツにお使いください。
- バッグやポケットの中に入れて持ち運びができるように、製品サイズと重量を最小限に抑えました。
- センサー技術による測定で、電磁波の影響を心配することなく、安全に排尿したかどうか確認できます。ペースメーカーを付けている方にも使用できます。
- パルスを当ててボタンを押すと、おむつの濡れ状態をLED(赤色点滅)で表示します。
- RoHSで規制されているPb、Hg、Cd、Cr⁶⁺、PBDE(S)などの特定有害物質を一切使用していません。

超軽量

49g

[単4電池2個含む]

仕様

品名	パルス(ポータブル排尿検知器)	本体材質	合成樹脂成形品(ABS、PC)
品番	7083	動作電源	DC3.0V(1.5V単4電池2本)
製品サイズ	奥行90×幅50×高さ20mm	付属品	単4電池2本(お試用)
製品重量	49g(単4電池2本含む)	製造会社	デイトロン株式会社
ボタン寿命	最大100,000サイクル	JANCODE	4519283004842



製造元

日本総代理店

DTron
DTRON Co.,Ltd.

ウチエ株式会社 <http://uchie.co.jp>

本社/大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29 TEL. (06) 6482-0230 FAX. (06) 6401-6372
関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3 TEL. (047) 362-0311 FAX. (047) 362-0312
福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5 TEL. (092) 323-4331 FAX. (092) 323-4332
兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井732-1 (修理センター/デモ機管理センター)

uchie
思いやりをかたちに—
since1988