

介護保険(購入) 組立不要 特許取得済

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

くるくるチェアD

座面くるくる介護らくらく!
狭い部屋でも移動すいすい!

- 座面高さ調節 フットレスト高さ調節 短奥行仕様
- 肘掛けはね上げ 座シート取り外し 段差超え
- ノーバンクタイヤ 4輪自在 フットプレートはね上げ
- フットレスト脱着 ストッパー SAL(セーフティロック)

※各機能説明はP3~4参照

座面の高さ調節

5段階

(42~50cm/2cm刻み/O型)
(41~49cm/2cm刻み/穴無し)
(40.5~48.5cm/2cm刻み/U型)

ストッパー

- 足元ストッパー(後輪) ●キャスターロック(前輪)

その他

- 座面回転機能

■U型シート 品番:KRU-174

¥116,600(税込)
(本体価格¥106,000)



肘掛けが前倒れ防止、
座位保持に使えるSAL
タイプもございます。
※詳しくはP.4参照



SALタイプ

■O型シート

品番:KRU-172

¥116,600(税込)
(本体価格¥106,000)



■穴無しシート

品番:KRU-173

¥118,800(税込)
(本体価格¥108,000)



■O型シート

品番:KRU172SAL

¥123,200(税込)
(本体価格¥112,000)



■穴無しシート

品番:KRU173SAL

¥125,400(税込)
(本体価格¥114,000)



■U型シート

品番:KRU174SAL

¥123,200(税込)
(本体価格¥112,000)




座面は360°回転




座面は360度回転(45度ごとにロック)します。回転ロックレバーを踏み、ハンドルで左右に回すと回転します。短奥行仕様時にフットプレートを折りたたんだ状態での回転操作は座面高さ3段階目からとなります。

ストッパーがついて安心

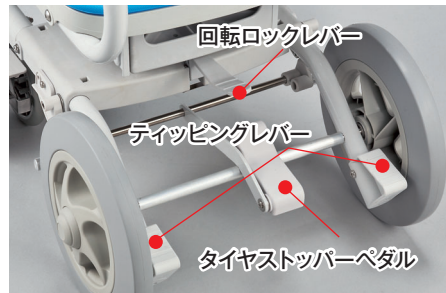

足元ストッパー採用。片手でワンタッチロックできます。前輪キャスターはキャスター毎のロックになります。後輪はノーバンクタイヤです。※後輪ストッパーをかけないと回転ロックレバーを押しても座面の回転はできません。

さらにコンパクトに!

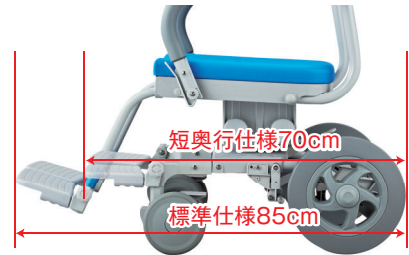


フットプレートを前輪上部に取付可能。奥行70cmとコンパクト。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)

短奥行仕様

全てのシートタイプで付け替え可能です。

規格図

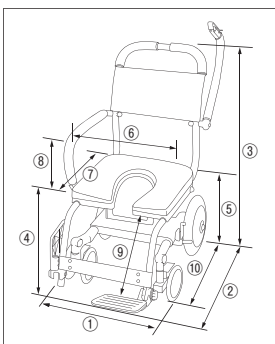

サイズ

① 幅	47[50.5]cm
② 奥行	85(70)cm
③ 高さ(ハンドル高さ)	86~94cm
④ 前座高	42~50cm(O型) 41~49cm(穴無し) 40.5~48.5cm(U型)
⑤ 後座高	40~48cm
⑥ 座幅(肘~肘)	39[40.5]cm
⑦ 座奥行	40cm
⑧ 肘から前座	20[25]cm
⑨ 前座から足台	33/35.5/38cm
⑩ 肘(ワリス軸)	57.5cm
前輪キャスター	5インチ
後輪タイヤ	10インチ

※()内の数字は短奥行仕様時のサイズです。

※[]はSALタイプ

仕様

品名	くるくるチェアD	
品番	KRU-172(O型) KRU-173(穴無し) KRU-174(U型) KRU172SAL(SAL O型) KRU173SAL(SAL 穴無し) KRU174SAL(SAL U型)	
材質	本体/アルミ*、ステンレス* シート/EVA 背シート/ナイロンメッシュ	
重量	約13kg(SAL 約14kg)	
耐荷重	100kg	
介護保険	購入対象品	
JANCODE	4519283002572(O型)	4519283005610(SAL O型)
	4519283002589(穴無し)	4519283005627(SAL 穴無し)
	4519283002596(U型)	4519283005634(SAL U型)
TAISコード	00129-000108(O型)	00129-000309(SAL O型)
	00129-000109(穴無し)	00129-000310(SAL 穴無し)
	00129-000089(U型)	00129-000311(SAL U型)

*本体塗装仕上げ ※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。

入浴介護用品

排泄介護用品