

介護保険(購入) 組立不要

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

品番:8100

¥130,900 (税込)
(本体価格¥119,000)

さわやかチェアPTO (オゾン消臭)

オゾンでまるごと除菌&消臭 コンパクトトイレ

ソフト便座 尿ハネガード 軽いお座りパッド

消臭 スペーサー 座面高さ調節

選べる肘掛け 肘掛け高さ調節 肘掛け後方回転

足引きスペース キャスター 滑り止めゴム

背シート奥行調節 背シート高さ調節

※各機能説明はP35~36参照

座面の高さ調節

4段階 (37~46cm、3cm刻み)

肘掛け

●高さ3段階調節(19/21.5/24cm)

●はね上げ

その他

●二重バケツ ●ソフト便座

NEW



入浴介護用品

排泄介護用品

オゾンでまるごと除菌&消臭



安全に手間をかけず 除菌&消臭

便座下にオゾン除菌消臭器をセット。
排泄後の気になる臭いを軽減します。



4段階切替	モード1	モード2	モード3	モード4
除菌	~2帖	~4帖	~8帖	~12帖
消臭	~4帖	~8帖	~12帖	~16帖



OCR



・スイッチを押すたびにON/OFFとモードが切り替わります。用途と帖数に
適応したモードを選択してください。

・コード式&コードレス(充電)式の2way仕様。場所や環境を選ばず使用で
きます。USBケーブル(Type-C)採用で給電も手軽にできます。

・防水レベル:IPX4 相当

・充電時間:最大6時間

Q. オゾンとは?

A. オゾンは自然界にも存在する物質で、非常に強い酸化力を持っています。


この力を使って細菌やウイルスを殺し、臭いの元となる物質を分解。強力な除菌・消臭効果があります。

Q. オゾンは安全なの?危険なの?

A. 適切に濃度を設定すれば、危険性はありません。高濃度になると人体に悪影響を及ぼす可能性がありますが、
弊社使用製品は有人下でも常時ご使用いただける低濃度オゾン除菌消臭器となっております。

※オゾンには特有のにおい「オゾン臭」があります。使用中「オゾン臭」を感じる場合があります。

座面高さ4段階調節

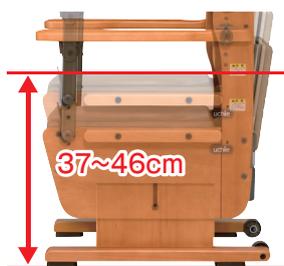

座面の高さは4段階(37~46cm、3cm刻み)の調節が可能です。

ひじ掛け高さ3段階調節



肘掛けの高さは、便座から19、21.5、24cmの3段階の調節ができます。

背シート奥行き2段階調節



背シートの位置を前後2段階(46・48cm)に変えられますので、体格・身体状況などに合わせてご使用できます。

すきまをなくし、移乗をサポート



ベッドとのすきまを埋め、移乗をサポートします。スペーサーは左右付け替え可能です。

軽く上がるお座りパッド



持ち手以外丸洗いです。

軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることはありません。

立ち上がりがラクです



足引きスペースがたっぷりありますので、立ち上がりがラクに行えます。

移動に便利な車輪付き



移動用車輪付きなので、お掃除などのちょっとした移動がラクです。
※人に乗せたままでの移動はできません。


肘掛け後方回転

肘掛けが後方に回転

後方に肘掛けを回転させる事ができるので、横のスペースが空き、介護しやすくなります。



安心の尿ハネガード付き

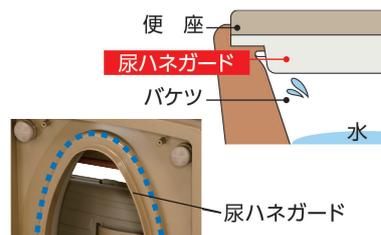

便座は尿ハネガード付きなので、尿飛び、尿ハネを防ぎます。汚水トレイの尿だまりを軽減します。

安心の二重バケツ




バケツが二重になっております。万が一の漏れにも安心です。

中まで洗えるやわらか便座



やわらかな便座なので、長時間座る方にも最適です。また取り外して中まで洗えるので清潔にご利用いただけます。

規格図

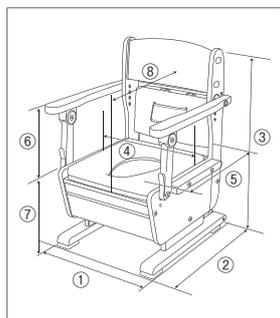

サイズ

① 幅	53.5cm
② 奥行	59.5cm
③ 高さ	81.5~90.5cm
④ 座幅(肘~肘)	44.5cm
⑤ 便座奥行	43.5cm
⑥ 肘から便座	19/21.5/24cm
⑦ 便座高	37~46cm
⑧ 背シート奥行	46/48cm
キャスター	直径5cm

仕様

品名	さわやかチェアPTO (オゾン消臭)
品番	8100
材質	本体/天然木 便座/(表)EVA(裏)ABS バケツ:二重バケツ/ポリプロピレン オゾン除菌消臭器/AES、ABS、アルミ
重量	約18.5kg
耐荷重	100kg
バケツ容量	約10リットル
電源	ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)
介護保険	購入対象品
付属品	布製ペーパーホルダー-15、スペーサーボード
JANCODE	4519283006242
TAISコード	00129-000373

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。