

介護保険(購入) 組立不要 特許取得済

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■品番: HB300

¥176,000 (税込)
(本体価格¥160,000)

ハイベル

折りたたみ自走式シャワーキャリー

座面高さ調節	フットレスト高さ調節	短奥行仕様
肘掛けはね上げ	座シート取り外し	段差超え
ノーバンクタイヤ	4輪自在	フットプレートはね上げ
フットレスト脱着	ストッパー	SAL(セーフティロック)

※各機能説明はP3~4参照


ストッパー

●駐車用ブレーキ

その他

- 折りたたみ
- サイドガード
- ノーバンクタイヤ

コンパクト!

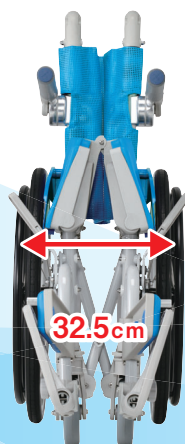

座面真ん中を持ち上げた後、タイヤ中心を挟むように押してください。簡単に折りたたむことができ、自立します。

自走、介助どちらにも使えます


サイドガード

取り外せる後輪タイヤ



握りやすい
ハンドリム

サイドガード

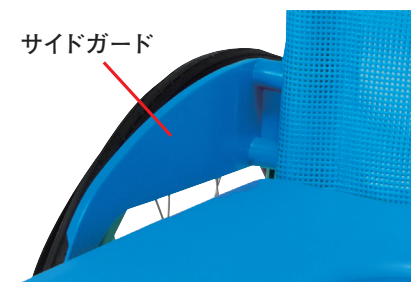

利用者本人がタイヤについているハンドリムを使って、浴室に進む事が可能。介助者が後ろから押して進むこともできます。

左右のサイドガードが、体が直接タイヤに触れたり、汚れることを防いでくれます。



後輪タイヤは車軸のボタンを押すとかんたんに取り外せます。持ち運びや収納時に便利です。


乗り降りがしやすい

フットレストが取り外せます


手元でロックがかけられます

脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすくなります。

乗り降りが
しやすい

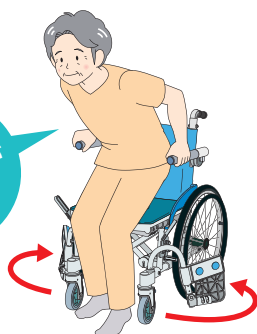


フットレストを持ち上げるだけで簡単に取り外すことが可能です。利用者を抱きかかえながら、片手で簡単にフットレストが取り外せます。

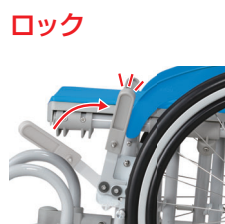

ロック


ロック (レバー収納)

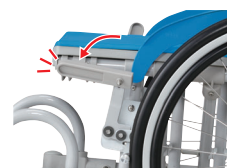

ロックレバーを後方に引くだけでロックが掛かります。前方に押すとロック解除されます。

ロックした後、レバーの向きが変えられるので、横移乗に邪魔になりません。

規格図

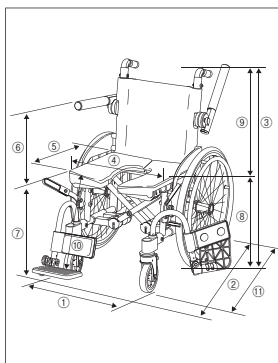

サイズ

① 幅	58.5(32.5)cm
② 奥行	97(95.5)cm
③ 高さ	83(83)cm
④ 座幅(肘~肘)	41.5cm
⑤ シート奥行	38.5cm
⑥ 肘から前座	27cm
⑦ 前座高	44cm
⑧ 後座高	43cm
⑨ 背シート高	30cm
⑩ 前座から足台	37.5/40cm
⑪ 奥行(フットレスト無し)	68.5cm
前輪キャスター	5インチ
後輪タイヤ	20インチ

※()は折りたたみ時のサイズ

仕様

品名	ハイベル
品番	HB300
材質	本体/アルミ*、ステンレス*、合成樹脂成形品 グリップ/PVC 座シート/EVA 背シート/ナイロンメッシュ タイヤ/PU(発泡) ハンドリム/アルミ
重量	約15kg
耐荷重	100kg
介護保険	購入対象品
JANCODE	4519283005566
TAISコード	00129-000304
*粉体塗装仕上げ	
※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。	

入浴介護用品

排泄介護用品

その他