

操作性が良い自走式シャワーキャリー

uchie®
思いやりをかたちに

ハイモア

NEW

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

介護保険(購入)

組立不要

肘 掛 け

はね上げ
セーフティ

ストッパー

駐車用ブレーキ

そ の 他

折りたたみ
サイドガード
フットサポート高さ調節
フットサポートはね上げ
ノーパンクタイヤ



折りたたためてコンパクト



品番: HM300
JANCODE: 4519283004828
TAISコード: 00129-000251

¥98,000(税抜)

簡単に折りたたみできます。

自走、介助どちらにも使えます



握りやすいハンドリム

利用者本人がタイヤについているハンドリムを使って、浴室に進む事が可能。介助者が後ろから押して進むこともできます。

ティッピングレバー




レバーを踏んで前輪を上げ段差越えができます。

駐車用ブレーキ



レバーを前方に倒すだけでロックが掛かります。

フットサポート

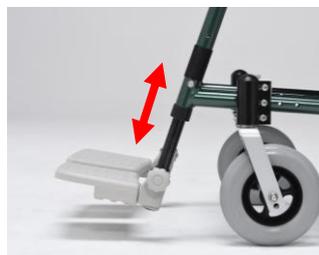

はね上げ、高さ調節が可能。(4段階/36.5~44cm)

シートベルト



体がずれ落ちないように固定します。※オプション品

座位保持に
使える前方
グリップ!



介助者が押す際に前方グリップを握って座位を保つこともできます。

■サイズ: 幅61×奥行100×高さ85cm、座幅(肘~肘)43.5cm、座奥行42cm、肘から前座30cm、前座高45cm、後座高42.5cm、バックサポート高40cm、前座から足台36.5/39/41.5/44cm、折りたたみ時幅34.5×奥行86.5×高さ85cm、前輪6×後輪20インチ ■重量: 約13kg ■耐荷重: 約100kg ■材質: 本体/アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品・グリップ/PVC・シート/PVCコーティングポリエステルメッシュ・クッション/合成ゴム、PVC・レッグサポート/ナイロン・タイヤ/PU(発泡)・ハンドリム/ナイロン

 **ウチエ株式会社**
http://uchie.co.jp

本社/大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29
TEL. 06-6482-0230 FAX. 06-6401-6372
関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3
TEL. 047-362-0311 FAX. 047-362-0312
福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5
TEL. 092-323-4331 FAX. 092-323-4332