

介護しやすく座面が上がるやわらかジェルで体圧分散! リクライニング車いす

# はいねーるジェル

介護保険(貸与)

組立要

特許取得済

肘掛け はね上げ

ストッパー 足元ストッパー

その他 リクライニング機能  
可動ハンドル  
フットレスト脱着  
フットプレートはね上げ  
ノーパンクタイヤ

NEW




車イス



品番:HNG300

¥200,000 (非課税)

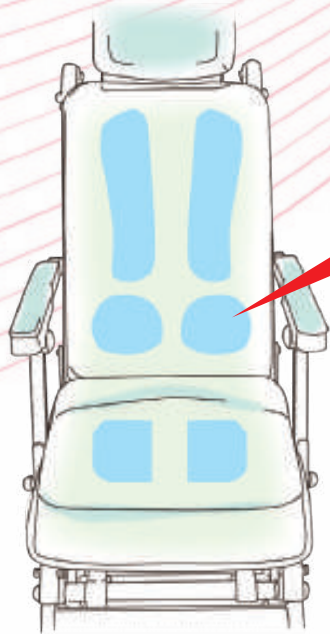

## やわらかジェル

長時間座っても  
お尻が痛くなりにくい。  
体圧を分散してくれます。




クッション内は  
ジェルとウレタンが  
使用されています。

## リクライニング時のフットレスト連動が選べます!


背上げ時



リクライニング時  
(連動)

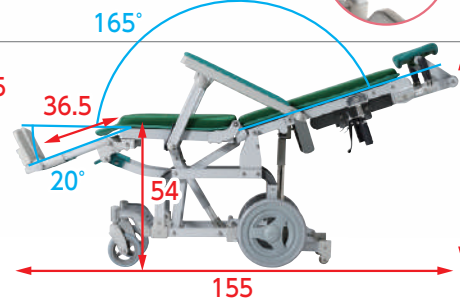


リクライニング時  
(連動解除)

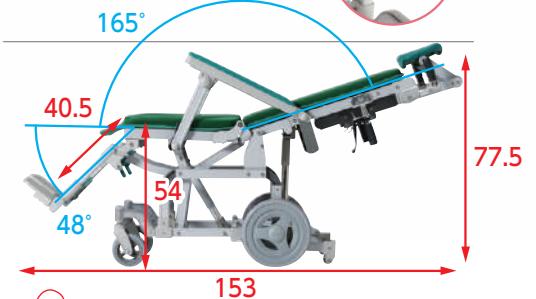

※ 転倒防止バー:長い  
※ (単位:cm)


- ハンドル下のリクライニングレバーを握りながら、背もたれを倒します。背もたれは97°~165°の間で無段階に調整が可能です。  
**連動してフットレストが上昇します。連動を解除させることも可能です。**リクライニングをすることで、座面にかかる体圧を分散させることができ、座位保持が困難な方の移動がラクになります。  
※ 背と脚を個別に角度調整する事はできません。

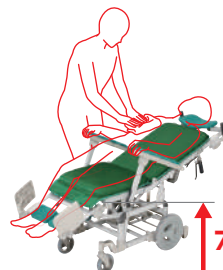

↑7.5cmUP!


リクライニング時に座面が高くなるので、腰への負担が軽減。介護しやすくなります。

## 後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バー

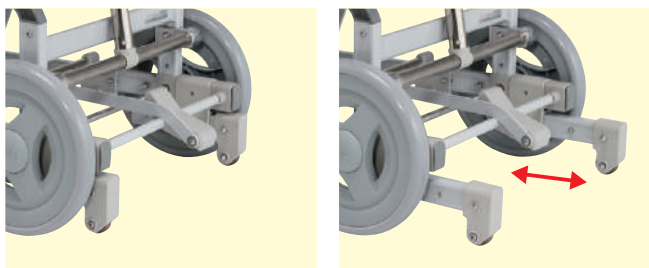

本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付きまして、走行の邪魔をしない小さなキャスター付きです。バーの長さが使用状況に応じて調節できます。

## ヘッドレストが頭をしっかり支えます

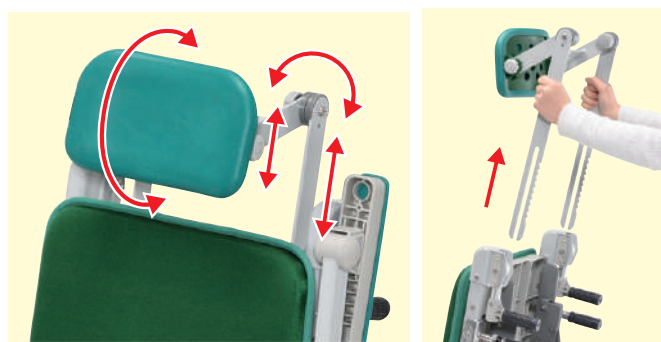


標準装備のヘッドレストは高さ、奥行、角度調整が可能。必要ない場合は取り外すこともできます。

## 操作しやすい可動ハンドル



ハンドルの向きを変えることができますので、リクライニング時の移動の操作を腰を曲げずに楽に行なえます。ハンドル横の切替ボタンを押してハンドルの向きを変えるだけのかんたん操作です。

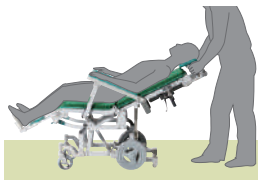


## フットレストが脱着できます



フットレストはピンロックでかんたんに取り外し可能。レッグサポートは後ろに倒すことができます。レッグサポート、フットプレートともに後ろに移動させることで、乗り降りする際に邪魔になりません。

## ストッパーがついているので安心です

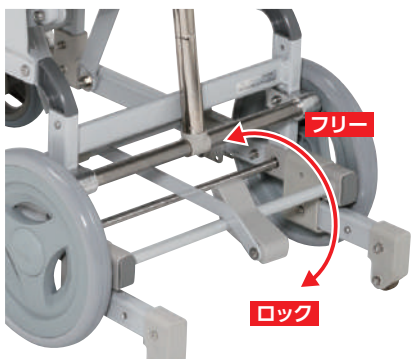

片足でワンタッチロックができます。ストッパーがついておりますので、より安全にご使用いただけます。

## 消臭シートカバー



オプションで消臭シートカバーをご用意。汗臭や加齢臭など気になる臭いを劇的に消臭します。防水加工付き。

はいねーるジェル専用  
消臭シートカバー

品番:7087

¥5,500(税抜)

サイズ:約45×115cm(布部分)

素材:(表)綿100%  
(裏)ポリウレタンフィルム

## 仕様

品名	はいねーるジェル
品番	HNG300
材質	本体/アルミ、ステンレス シート/ポリウレタン弾性繊維、EVA、ポリウレタンジェル タイヤ/PP、PU(発泡)
重量	約22.5kg
耐荷重	約100kg
介護保険	貸与対象品
JANCODE	4519283004774
TAISコード	00129-000252

## サイズ

幅	53cm	リクライニング角度	97°~165°
奥行	105(110)[155]cm	前輪キャスター	5インチ
高さ	121.5[77.5]cm	後輪タイヤ	10インチ
座幅(肘~肘)	42.5cm		
シート奥行	40[41]cm		
肘から前座	22[24]cm		
前座高	46.5*1 48.5*2 [54]cm		
前座から足台	43[36.5]cm		
奥行(フットレスト無し)	79.5(84)[126]cm		

※( )は転倒防止バーが長い場合。  
※[ ]は最大リクライニング時。  
※1 乗車時。 ※2 非乗車時。

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。

uchie  ウチエ株式会社 <http://uchie.co.jp>

取扱店

本社/大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29 TEL.(06)6482-0230 FAX.(06)6401-6372  
福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5 TEL.(092)323-4331 FAX.(092)323-4332  
関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3 TEL.(047)362-0311 FAX.(047)362-0312  
兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井732-1

●常に皆さまのご要望に応え、改善して参りますので、デザイン・色柄・仕様は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 ●商品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。 ●本カタログ内容は、2019年7月現在のものです。