

介護保険(購入) 組立不要 特許取得済

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

らく りん じ ざい  
**楽チル4輪自在SAL**

自在輪で方向転換も楽々  
シートを傾けて座位を安定  
コンパクトなシャワーキャリー

座面高さ調節 フットレスト高さ調節 短奥行仕様

肘掛けはね上げ 座シート取り外し 段差超え

ノーバンクタイヤ 4輪自在 フットプレートはね上げ

フットレスト脱着 ストッパー SAL(セーフティロック)

※各機能説明はP3~4参照

座面の高さ調節

**4段階**

- (46~52cm/2cm刻み/O型)
- (45~51cm/2cm刻み/穴無し)
- (44.5~50.5cm/2cm刻み/U型)

ストッパー

●キャスターロック(全輪)

その他


●チルト機能 ●その場で転回 ●真横移動

■U型シート 品番:RT012SAL

¥155,100 (税込)  
(本体価格¥141,000)



かんたん操作で楽々チルト!

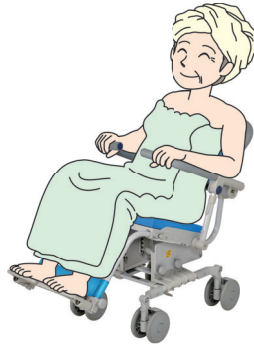

チルトレバーを握りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。ガスシリンダータイプなのでスムーズです。  
(6°~22°、無段階)

■O型シート 品番:RT010SAL

¥155,100 (税込)  
(本体価格¥141,000)



■穴無しシート 品番:RT011SAL

¥157,300 (税込)  
(本体価格¥143,000)



狭いスペースでもラクラク小回り

その場での転回



真横移動



小回りがきくので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪すべて自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動ができます。


前倒れ防止に使えるセーフティロック



肘掛けはね上げはロック機能付きで安心。

肘掛けが前に回っているので、利用者が前に倒れるのを防ぐことができます。また、肘掛けの前を持つことによって座位保持がしやすくなります。肘掛けははね上がるので、乗り降りの邪魔になりません。

規格図

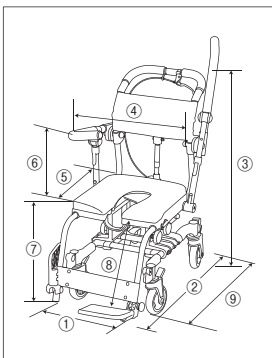

サイズ

① 幅	50.5cm
② 奥行	95(113)cm
③ 高さ	93.5~99.5 (83~89)cm
④ 座幅(肘~肘)	40cm
⑤ 座奥行	40cm
⑥ 肘から前座	24cm
⑦ 前座高	46~52cm(O型) 45~51cm(穴無し) 44.5~50.5cm(U型)
⑧ 前座から足台	34/36.5/39cm
⑨ 断行(ワリス機)	62(77)cm
最大チルト角度	22°
キャスター	5インチ

※( )最大チルト時

仕様

品名: 楽チル4輪自在SAL

品番: RT010SAL(O型) RT011SAL(穴無し) RT012SAL(U型)

材質: 本体/アルミ\*、ステンレス\* シート/EVA 背シート/ナイロンメッシュ

重量: 約14kg

耐荷重: 100kg

介護保険: 購入対象品

JANCODE: 4519283005924(O型) 4519283005931(穴無し) 4519283005948(U型)

TAISコード: 00129-000335(O型) 00129-000336(穴無し) 00129-000337(U型)

\*粉体塗装仕上げ

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。