介護保険(購入) 組 立 不 要

特 定 福 祉 用 具 · 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具

シャトレチェア6輪SAL

段差越えと小回りを重視した トイレにも使える6輪シャワーキャリー

座面高さ調節 フットレスト高さ調節 短奥行仕様

肘掛けはね上げ 座シート取り外し

ノーパンクタイヤ 4 輪 自 在

ットレスト脱着【ス

※各機能説明はP3~4参照

座面の高さ調節

5段階

(45~55cm/2.5cm刻み/O型) (44~54cm/2.5cm刻み/穴無し) (43.5~53.5cm/2.5cm刻み/U型)

ストッパー

- ●キャスターダブルロック(前後輪)
- その他
- ●簡単段差上げ
- ●専用バケツ取付
- ●洋式トイレ設置
- ●その場で転回

分類コード/入浴: No.093303 ポータブルトイレ: No.091203(バケッ付)

■O型シート 品番:SW6080SAL



■穴無しシート 品番:SW6081SAL



■O型バケツ付 品番:SW6083SAL



■U型バケツ付 品番:SW6084SAL

■U型シート 品番: SW6082SAL

NEW

¥ 137,500 (税込) (本体価格¥125,000)

肘掛けが前倒れ防止、 座位保持に使えます。

※詳しくはP.4参照



座面下内寸



弱い力でラクラク段差越え



ハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによっ て前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小 さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。

小回りがききます



キャスターは前後輪が方向自在輪で中輪が固 定輪です。小回りがきくので、その場での本体の 360度の転回が可能。真横移動はできません。

トイレにもバケツ装着も



洋式トイレに装着できます。 ※洋式トイレによっては適合 しない場合があります。

SW6083SAL(O 型バケツ付) SW6084SAL(U 型バケツ付)


バケツ (オプション品) の脱着 が可能です。 状況に合わせて簡易トイレとし

てご使用できます。



※シャトレチェア6輪の画像使用

規格図

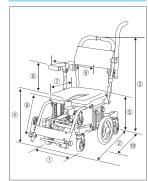

サイズ

① 幅	54.5cm
② 奥 行	96 (83.5) cm
③ 高 さ	89~99cm
④前座高	45~55cm(O型) 44~54cm(穴無し) 43.5~53.5cm(U型)
⑤後座高	43.5~53.5cm
⑥ 座幅 (肘~肘)	40.5cm
⑦座 奥 行	40cm
⑧ 肘から前座	24.5cm
⑨ 前座から足台	39/41.5/44cm
10 新(フットレスト無レ)	69cm
前後輪キャスター	5インチ
中輪タイヤ	10インチ

※()内の数字は短奥行仕様時のサイズです。

仕 様

	品	名:	シャトレチェア 6 輪 SAL
型) J型) n	品	番:	SW6080SAL(0型) SW6081SAL(穴無し) SW6082SAL(U型)
	材	質:	本体/アルミ*、ステンレス
	重	量:	約 17kg
	介護保	険:	購入対象品
	JANCO	DE :	4519283005818(0型 4519283005825(穴無 4519283005832(U型

6082SAL(U 型) /アルミ*、ステンレス* シート/ EVA 背シート/ナイロンメッシュ

荷 重: 100kg 7kg

4519283005849(0 型バケツ付) 9283005818(0型) 9283005825(穴無し) 4519283005856(U型バケツ付) 9283005832(U型)

TAISコード: 00129-000353(0型) 00129-000356(0 型バケツ付) 00129-000354(穴無し) 00129-000357(U型バケツ付) 00129-000355(U型)

*粉体塗装仕上げ

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。